



## AquaVENT® FD140i




### Oxigenoterapia y CPAP de Alto Flujo CPAP de Burbujas

Todo en un mismo Equipo



Circuitos Respiratorios  
Calefactados Protegidos  
con Tecnología Biocote

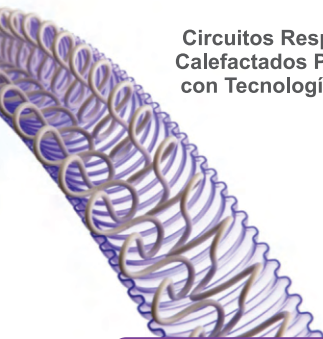

Efectiva Contra un amplio espectro de Micro-Organismos

Diseñado para Ventilación Mecánica Invasiva y VNI

### Humificador Servocontrolado de gran eficiencia y confiabilidad



## NeoFlow Systems

Oxigenoterapia de Alto Flujo Neonatal, nCPAP y CPAP de Burbujas



# Spirale®

Para ventilación Invasiva y No Invasiva

Dispositivo para administrar fármacos inhalados

- ▶ Optimización de la Aerosolterapia en Ventilación Mecánica Invasiva.
- ▶ Garantía en la entrega del Fármaco Inhalado con partículas de aerosol menores a  $2\text{ }\mu\text{m}$ .
- ▶ Ideal para Aerosolterapia de rescate.
- ▶ No requiere desconexión del circuito respiratorio.




No aumenta el espacio muerto

## Ultra-PEP

by Armstrong Medical

- ▶ La Terapia de espiración contra resistencia en combinación con la Oxigenoterapia de Alto Flujo, optimiza el manejo de secreciones y mejora la CRF.

- ▶ El estancamiento de las secreciones promueve el incremento del riesgo de infecciones crónicas, inflamación y reducción de intercambio gaseoso.
- ▶ El Dispositivo ULTRA-PEP es usado para movilizar secreciones y de esta manera ayuda a despejar la vía aérea.

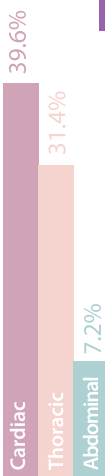

Retroalimentación Visual incrementa la efectividad de la terapia

Ligero, portable y fácil de usar.

El dispositivo funciona en cualquier orientación.


La graduación mediante rotación permite un ajuste preciso de la presión.

La pieza de boca desmontable facilita la conexión al tubo de traqueotomía o a la máscara facial





# AquaVENT® VT Circuito

Circuito respiratorio  
convencional

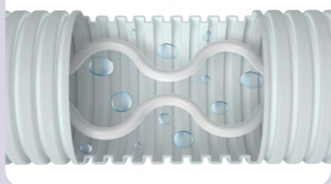


AquaVENT®  
VT Circuito

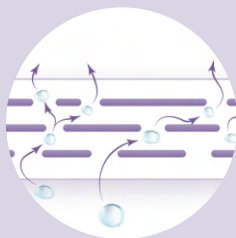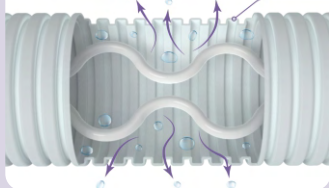

## Transición de vapor (VT) ¿cómo funciona?

- 1 | La alta tasa de transición de vapor de humedad (MVTR) se logra a través de las propiedades únicas de la estructura de tubos en capas de la rama espiratoria.
- 2 | En presencia de presurización del circuito respiratorio y calentamiento activo de la rama espiratoria, el vapor de agua navega por un camino a través de la estructura en capas de tubo.
- 3 | El vapor de agua se libera a la atmósfera, como vapor de agua o como agua condensada.
- 4 | La rama espiratoria está ausente de agua condensada a temperaturas ambiente de hasta 20° C.
- 5 | Este proceso de permeabilidad al vapor no está asociado con la pérdida de volumen de gas del circuito respiratorio. No tiene ningún efecto sobre el rendimiento/eficacia del ventilador bajo ninguna condición clínica.

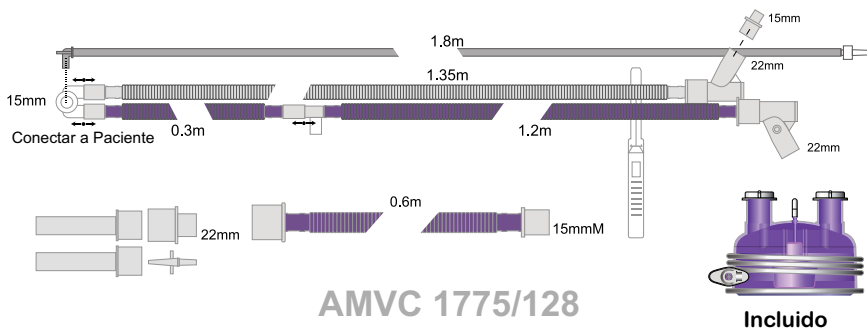

# CIRCUITOS PARA VENTILACION INVASIVA


Adulto/Pediatric/Neonatal

**AquaVENT®**

Circuito respiratorio, neonatal, de doble rama calentada con cámara humidificadora de auto llenado, para ventilación convencional.

Compatible con todas las marcas de ventiladores mecánicos


## AMVC 1775/171

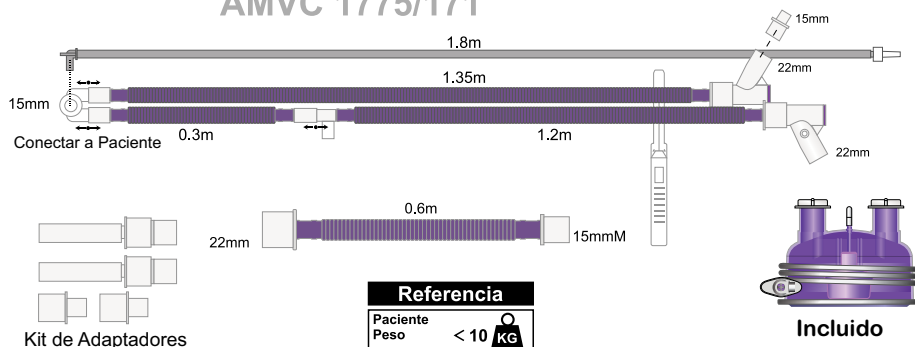

Circuito respiratorio, adulto, de doble rama calentada con cámara humidificadora de auto llenado, para ventilación convencional.

Compatible con todas las marcas de ventiladores mecánicos


## AMVC 1775/105

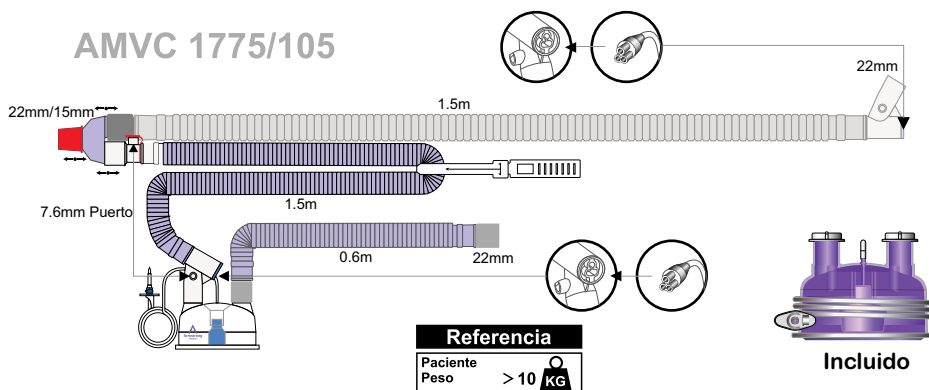

# CIRCUITOS DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO


Adulto/Pediátrico/Neonatal

Circuito para Oxígeno de Alto Flujo AquaVENT®, Neonatal, de una rama calentada con cámara Humificadora de auto llenado, compatible con Humificador MR-850 Fisher & Paykel.

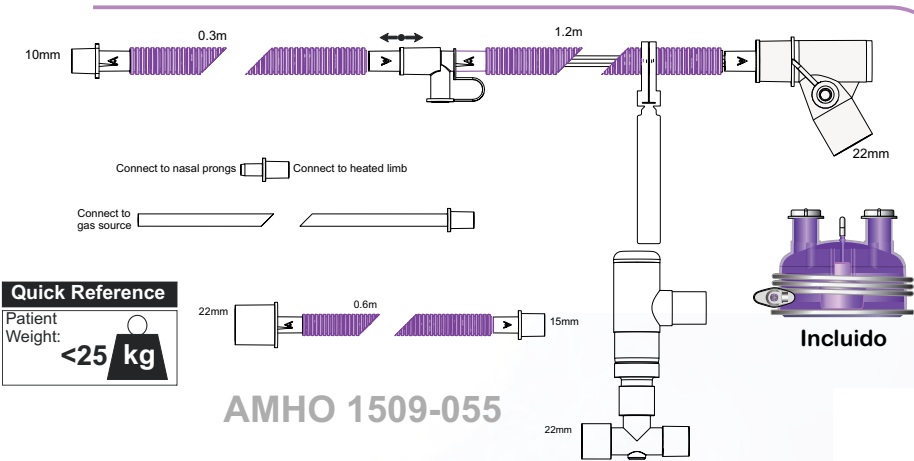

Circuito para Oxígeno de Alto Flujo AquaVENT®, adulto, de una rama calentada con cámara Humificadora de auto llenado, compatible con Humificador MR-850 Fisher & Paykel.

## AMHO 1509/008

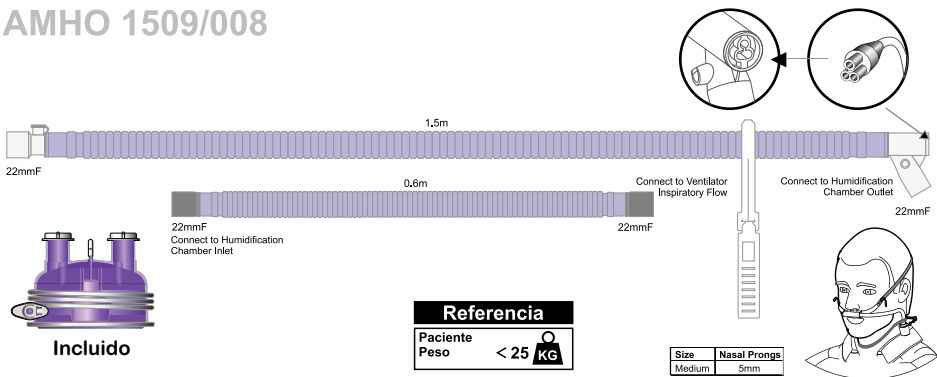





Proven Antimicrobial Protection

## Hoja informativa de la Tecnología Antimicrobiana BioCote®

La tecnología Biocote protege la superficie del potencial ataque negativo de los microbios, mejorando las cualidades del mismo de la siguiente manera:

*Un producto antimicrobiano es un producto que previene el crecimiento y la supervivencia de microbios; incluyendo bacterias, mohos y hongos.*

### La tecnología Biocote:

Su eficacia está probada en un amplio rango de bacterias, hongos y virus como el AH1N1.

Reduce la concentración microbiana hasta en un 99.99%



Se observa una reducción significativa en sólo 15 minutos. Se observa una reducción de hasta un 99.5% en sólo 2 horas

Actúa de manera continuada durante todo el tiempo de vida esperado del producto.

## Cómo funciona la tecnología Biocote®?

La tecnología Biocote protege los productos mediante una interacción con los microbios contaminantes de la superficie; éstos no sobreviven tras ser expuestos a la tecnología Biocote.

La tecnología Biocote es un medio ideal para mantener la superficie de un producto más higiénica entre limpieza y limpieza.

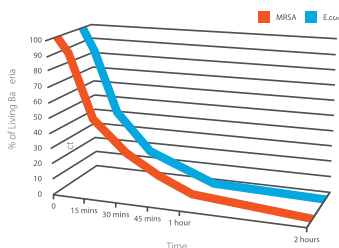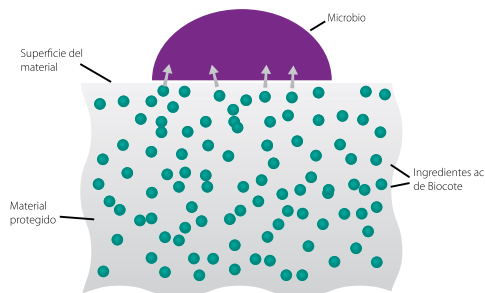

### Tecnología Biocote:

Detiene la reproducción celular

Daña la pared celular

Interrompe la producción de energía y otras funciones celulares



**Contacto :**

-  982 492 796
-  999 201 141
-  982 706 190
-  952 391 344

E-mail: [ventas@wpsoluciones.com.pe](mailto:ventas@wpsoluciones.com.pe)  
[wp@wpsoluciones.com.pe](mailto:wp@wpsoluciones.com.pe)



- Desde 1999 -

"Un aliento de vida, para tu vida"  
**Representante Exclusivo en el Perú**

[www.wpsoluciones.com.pe](http://www.wpsoluciones.com.pe)



**¡Líderes en ventilación mecánica!**

**\* ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL \***

